

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С SC PACS WEB VIEWER



СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ЕООД

www.novotika.com
<http://www.pacs.bg>
support@pacs.bg

Версия на софтуера 2.3.0.0

19.07.2021 г. гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ

Изисквания	3
Потребителски интерфейс.....	3
Бутони за анотации и обработка на образа	12
Разчитане	18
Забележки	24
Потребителски акаунти и права.....	27

Версии на документа

Версия	Автор	Дата	Описание на промените
8	Мария Атанасова	Март 2023	Добавяне на информация, изисквана от MDR – стр. 4
9	Мария Атанасова	Април 2023	Смяна на адреса на фирмата – стр. 4

Предназначението на софтуера SC PACS е свързано с архивиране на медицински образни изследвания, комуникация на образни изследвания с медицински устройства за изображения, визуализация и управление на образни изследвания, статистика, запис на изследвания на електронни средства и отпечатването им на медицински принтери.

Най-големите потребители на SC PACS са болниците. Основната цел на SC PACS е да замени хартиените филмови копия с цифрови изображения, които могат да се използват и виждат едновременно от няколко различни медицински специалисти и различни системи за медицинска автоматизация.

SC PACS сървърът съдържа базата данни с изображения. SC PACS Viewer се свързва към SC PACS сървъра чрез локална мрежа (LAN) или широкообхватна мрежа (WAN).

SC PACS е медицинско изделие съгласно Правило 11 на MDR.

SC PACS се произвежда от Софтуерна компания ООД, България.

Адрес: СОФИЯ 1407, ул. „Козяк“ 9.

Уебсайтове: <https://novotika.com>, www.pacs.bg

SRN: BG-MF-000024466

Основен UDI-DI: 380060000681SCZFP2PQ

Изисквания

- ✓ За да стартирате SC PACS WEB Viewer, работното Ви място трябва да има актуална версия на който и да е браузър. Софтуерна Компания ЕООД препоръчва Google Chrome.


Потребителски интерфейс

- ✓ За да заредите SC PACS WEB Viewer, е необходимо да напишете адреса на сървъра с наклонена черта и scpacs, например:

<http://10.212.0.68/scpacs/>

Някои функции на софтуера се определят от нивото на достъп на потребителя! За допълнителна информация се обърнете към PACS администратора.

След като се зареди адресът, трябва да видите следния прозорец:

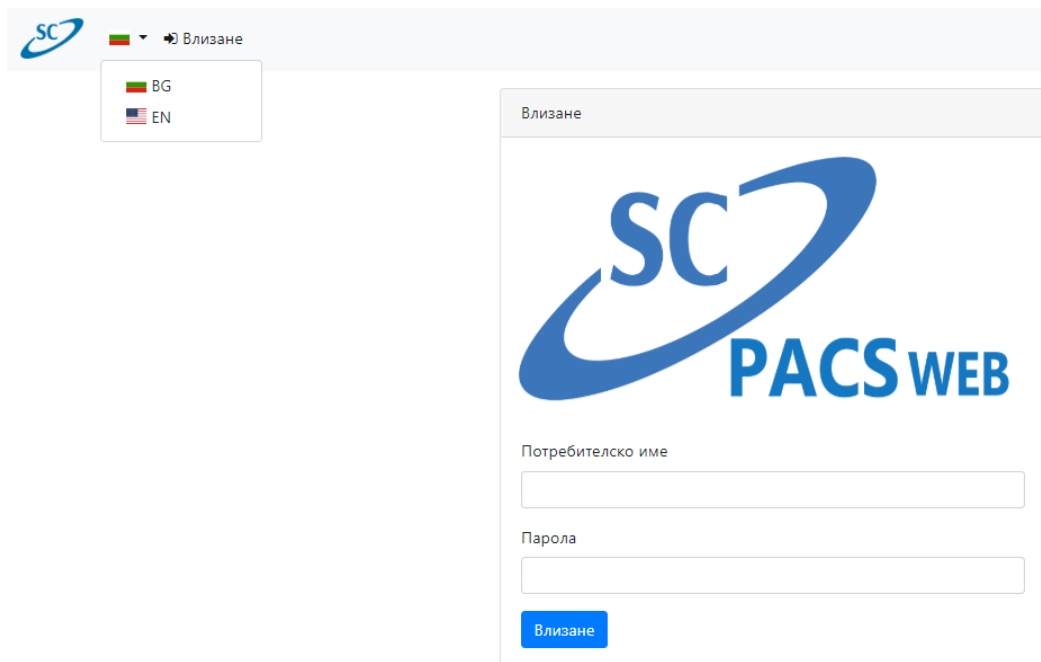

SC PACS WEB

Потребителско име

Парола

Влизане

- ✓ SC PACS WEB VIEWER разполага с два езика(български и английски), които можете да изберете от падащото меню в горния ляв ъгъл.
- ✓ Когато тази страница се зареди, е необходимо да въведете своето потребителско име и парола. Ако имате такива за SC PACS Viewer, може да използвате тях.
- ✓ Ако объркате Вашето потребителско име или парола, ще получите веднага предупреждение за сгрешено име или парола:

Влизане



Потребителско име

Парола

Влизане

Incorrect username or password.

- ✓ При правилно въведени потребителско име и парола, ще се зареди екранът за търсене:


🇧🇬
Начало
Днешни изследвания
Получени изследвания
Статистика
Импортиране
Помощ
user

Списък с изследвания

Филтри

Настройки

Име на пациент

ID на пациент

Дата на раждане

Описание

Вид изследване

- x

Дата на изследването (От)

Дата на изследването (До)

Диагноза

Изчисти

Търси

Днешни изследвания

Покажи 25 резултата

Първа

Предидшна

Следваща

Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото
Няма намерени резултати								

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

Първа

Предидшна

Следваща

Последна

- ✓ В горния десен ъгъл се показва потребителското име, с което сте се вписали:

SC  Начало  Днешни изследвания  Получени изследвания  Статистика  Импортиране  Помощ  user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане

Описание Вид изследване - x

Дата на изследването (От) Дата на изследването (До) Диагноза

Изчисти Търси Днешни изследвания

Покажи 25 резултата

Първа Предишна Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото
Няма намерени резултати								

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

Първа Предишна Следваща Последна

- ✓ След като сте се вписали в SC PACS WEB Viewer, може да търсите по различни критерии – „Име на пациента“, „ID на пациента“, „Дата на раждане“, „Описание на изследването“, „Тип на модалност“, „Част от тялото“, „Дата на изследване“ (От дата | До дата | От/До дата), „Диагноза“, „Отделение“, от което е изпратен пациента.
- ✓ Когато избете да търсите по някой от следните критерии: „Дата на раждане“ или „Дата на изследване“, (От дата | До дата | От/До дата) под съответното поле се появява календар, от който да изберете желаните дати:

SC  Начало  Днешни изследвания  Получени изследвания  Статистика  Импортиране  Помощ  user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане

Описание Вид изследване - x

Дата на изследването (От) Дата на изследването (До) Диагноза

Изчисти Търси Днешни изследвания

Покажи 25 резултата

Първа Предишна Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото
Резултати от 0 до 0 (от общо 0)					

Първа Предишна Следваща Последна

SC Начало Днешни изследвания Получени изследвания Статистика Импортиране Помощ demo

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане Описание

Вид изследване - x Дата на изследването (От)

Диагноза Модел

Покажи 25 резултата

Изчисти Търси

Днес Вчерашни Последните 7 дни Последните 30 дни Този месец Предходен месец Custom Range

Юни 2021							Юли 2021						
По	Вт	Ср	Че	Пе	Съ	Не	По	Вт	Ср	Че	Пе	Съ	Не
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8

16/06/2021 - 16/06/2021 Откажи Приложи

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание
Няма намерени резултати				

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

- ✓ При маркиране на полето за модалност или ЕКГ, се появява падащо меню, в което избирате желаната от Вас модалност. Ако искате да търсите във всички модалности, просто оставете полето празно:

SC Начало Днешни изследвания Получени изследвания Статистика Импортиране Помощ user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане Описание

Вид изследване AS BI CD CF

Дата на изследването (От)

Покажи 25 резултата

Изчисти Търси

Първа Предишна Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Време	Вид изследване	Част на тялото
Няма намерени резултати							

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

Първа Предишна Следваща Последна

- ✓ На екрана за търсене има и три бутона :
- „Търси” – търси в базата данни с избраните филтри.
 - „Изчисти” – премахва избраните филтри.
 - „Днешни изследвания” – показва изследванията от деня.

SC  Начало  Днешни изследвания  Получени изследвания  Статистика  Имортиране  Помощ user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане

Описание Вид изследване - x

Дата на изследването (От) Дата на изследването (До) Диагноза

Покажи 25 резултата

Първа Предишна Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото
Няма намерени резултати								

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

Първа Предишна Следваща Последна

- ✓ След като въведете желаните критерии и натиснете „Търси“, се зареждат съответните изследвания:

SC  Начало  Днешни изследвания  Получени изследвания  Статистика  Имортиране  Помощ user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане

Описание Вид изследване - x

Дата на изследването (От) Дата на изследването (До) Диагноза

Покажи 25 резултата

Първа Предишна 1 Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото	Отделение
705	Unknown3	2003-06-01	M	study	2006-11-22	15:15:56	XA		
705	Unknown3	2003-06-01	M	Study	2006-07-04	12:01:43	CR	CHEST	
705	Unknown3	2003-06-01	M		2006-06-16	14:10:08	MR		
705	Unknown3	2003-06-01	M	ABDOMEN	2006-02-23	09:42:53	CT		
705	Unknown3	2003-06-01	M		2005-09-10	20:55:40	CT\DOC	HEAD	SCT7000TS
705	Unknown3	2003-06-01	M	MAMMO	2003-06-01	15:15:57	MG	BREAST	

- ✓ За всеки пациент има две опции:
- 1) Ако натиснете на ID на пациент – отваряте всички изследвания на пациента.
 - 2) Ако натиснете върху дата на изследването – отваряте конкретното изследване.

SC  Начало Днешни изследвания Получени изследвания Статистика Импортиране Помощ user

Списък с изследвания

Филтри Настройки

Име на пациент ID на пациент Дата на раждане

Описание Вид изследване - x

Дата на изследването (От) Дата на изследването (До) Диагноза

Изчисти Търси Днешни изследвания

Покажи 25 резултата

Първа Предишна 1 Следваща Последна

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Описание	Дата	Време	Вид изследване	Част на тялото	Отделение
705	Unknown3	2003-06-01	M	study	2006-11-22	15:15:56	XA		
705	Unknown3	2003-06-01	M	Study	2006-07-04	12:01:43	CR	CHEST	
705	Unknown3	2003-06-01	M		2006-06-16	14:10:08	MR		
705	Unknown3	2003-06-01	M	ABDOMEN	2006-02-23	09:42:53	CT		
705	Unknown3	2003-06-01	M		2005-09-10	20:55:40	CT\DOC	HEAD	SCT7000TS
705	Unknown3	2003-06-01	M	MAMMO	2003-06-01	15:15:57	MG	BREAST	

Забележка: SC PACS Web поддържа VOI Lut.

- ✓ След като отворите изследването, ще се визуализира следният прозорец, като автоматично ще ви се зареди първият образ от серията на изследването:

SC  Начало Днешни изследвания Получени изследвания Статистика Импортиране Помощ user

Разделяне на екрана

Пациенти:

Unknown3

XA ID: SID3189B1630
date: 20061122
time: 151556

CR ID:
date: 20060704
time: 120143


MR ID: 176
date: 20060616
time: 141008.406

Pat. ID: 705
Std. ID: SID3189B1630
Std. Descr.: study

Ser.#: 1
Img.#: 1


Unknown3
M
2006-11-22
15:15:56
512 x 512
Zoom:0.78
WW:255 WL:128

- ✓ В лявата част на екрана се визуализират сериите на изследването (в случай че сте отворили изследването от колона "Дата"), а ако сте го отворили през колона "ID на пациент", в лявата част ще се заредят всички изследвания и съответно сериите към тях.
- ✓ В секция „Разделяне на екрана“ има опция, с която да изберете удобен за Вас многосериен изглед.

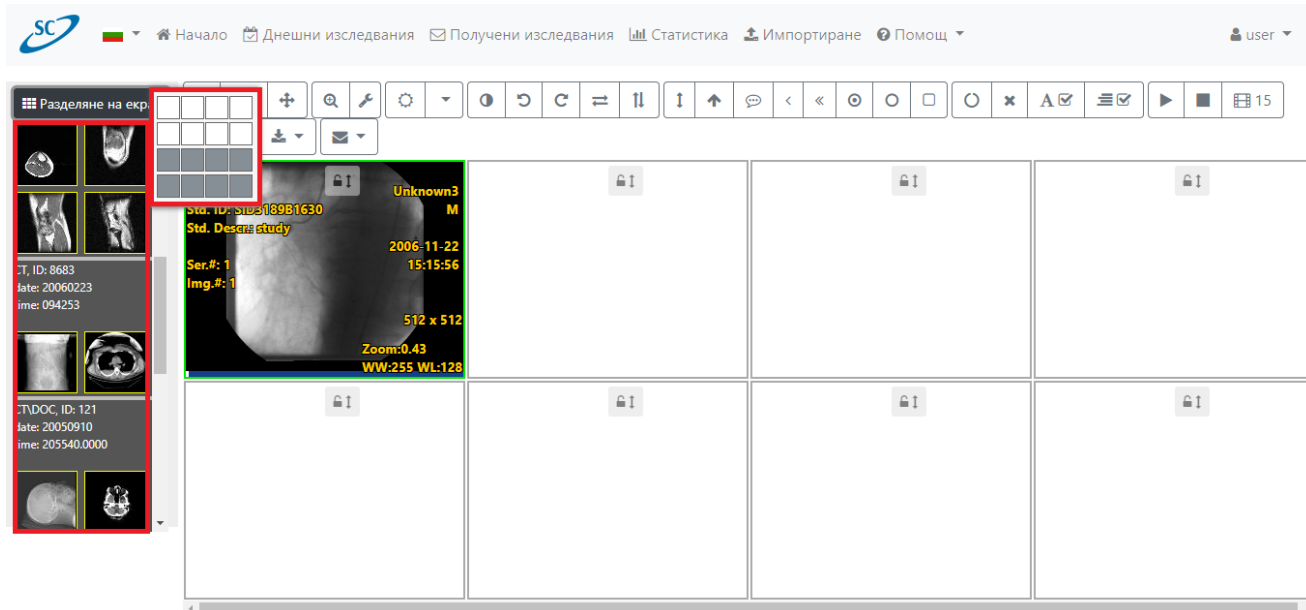


Забележка: При многосериен изглед, различните серии се зареждат с **влачене** на образа до прозореца, в който искате да се визуализира или чрез щракване върху серията.


- ✓ След като зададете вида на многосерийният изглед, изберете сериите за визуализация. За да разглеждате всяка серия поотделно, поставете курсора на мишката върху нея и скролирайте (със скрола на мишката). Белият правоъгълник в долната част на образа, показва къде се намирате в общ план от изследването:

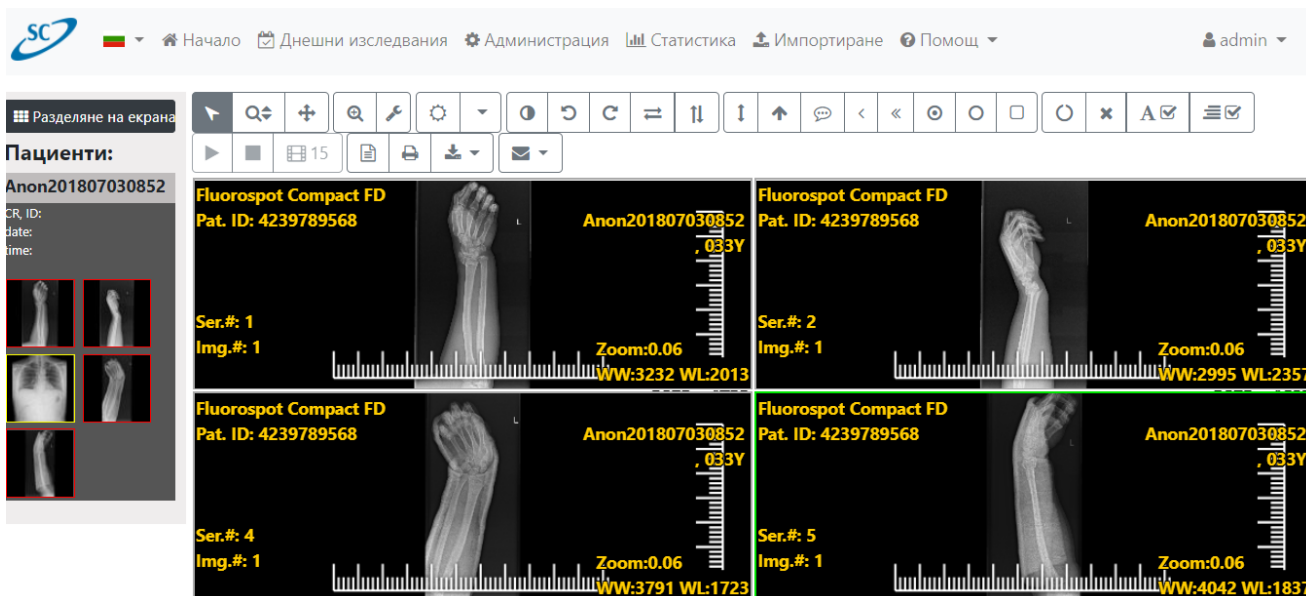

- ✓ Възможност за използване на референтни линии, при преглед на две серии от пациентското образно изследване:

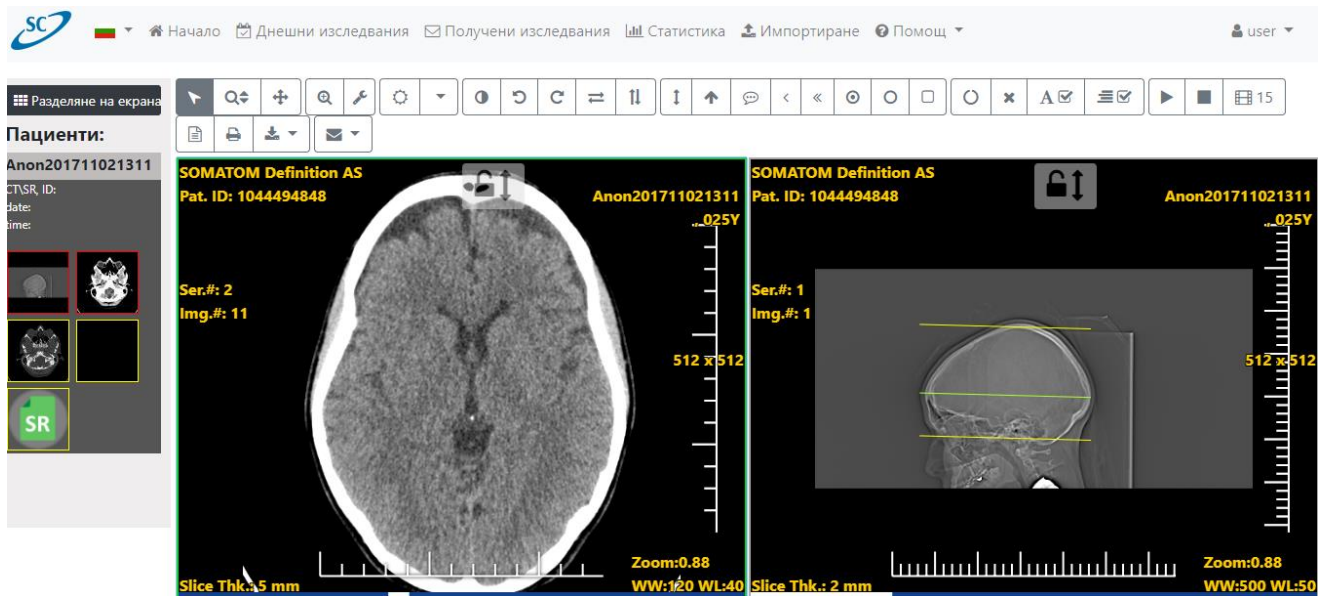

✓ В горната част има лента с инструменти, с които можете да правите различен тип анотации:

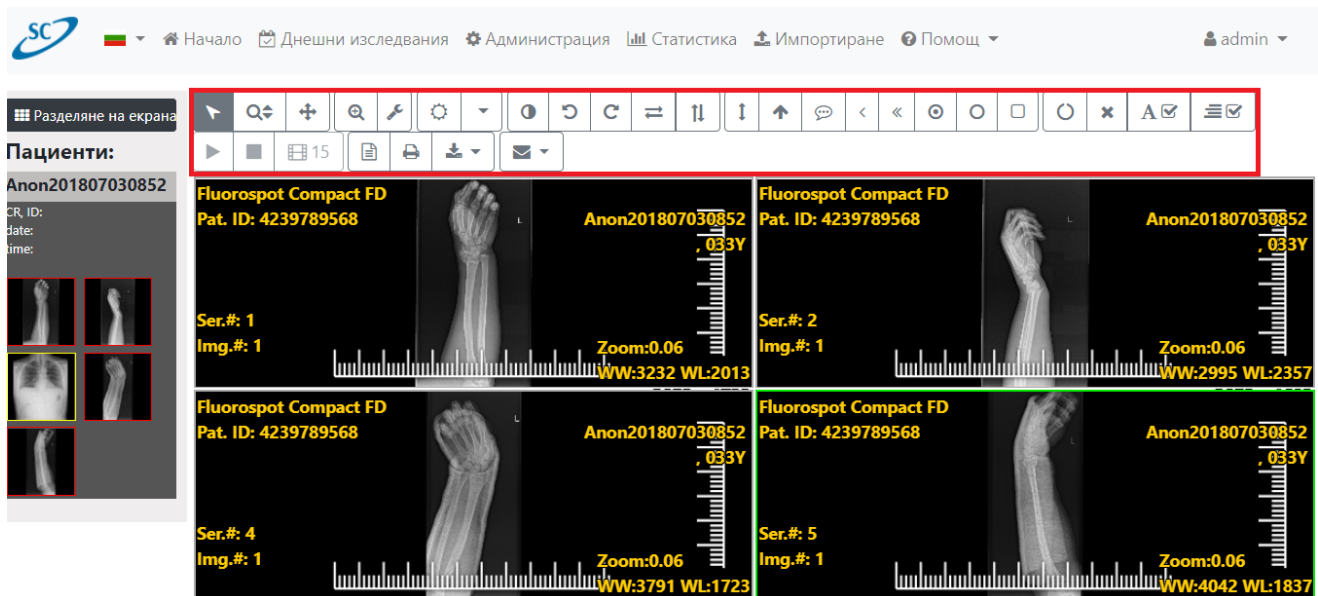

Бутони за анотации и обработка на образа



- Приближаване/отдалечаване. След като го изберете, натиснете ляв бутон и движете. Мишката (нагоре/надолу).



- Преместване – служи за местене на образа. След като го изберете, натиснете ляв бутон и движете мишката.



- Лупа – за да използва този бутон, потребителят трябва да кликне върху него и после върху изображението.




- Настройки на лупата – показва диалог, където потребителят може да настрои нивото на увеличаване и размера на лупата




- WW/WC – този инструмент се използва за регулиране на нивото на контраста на изображението; веднъж избран, потребителят трябва да кликне върху изображението и да мести мишката нагоре или надолу или да избере от предварително определените нива на контраст в падащото меню.

Можете ръчно да въведете предварително дефинирани параметри на прозореца:

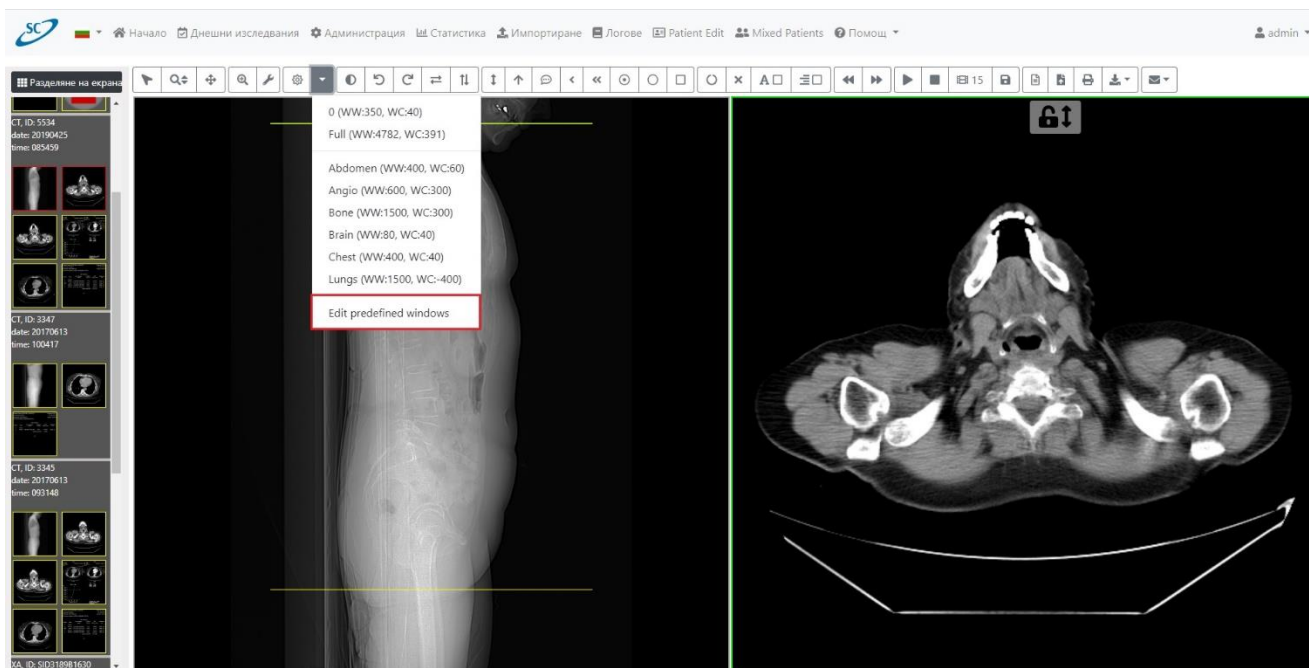

С издаването на версия 2.2.0.0 е добавена функционалността MPR, която е достъпна чрез бутона, показан на следващата екранна снимка. След като изберете изследване чрез плъзгане или щракване в левия панел, можете да го покажете в аксиална, коронална или сагитална равнини.

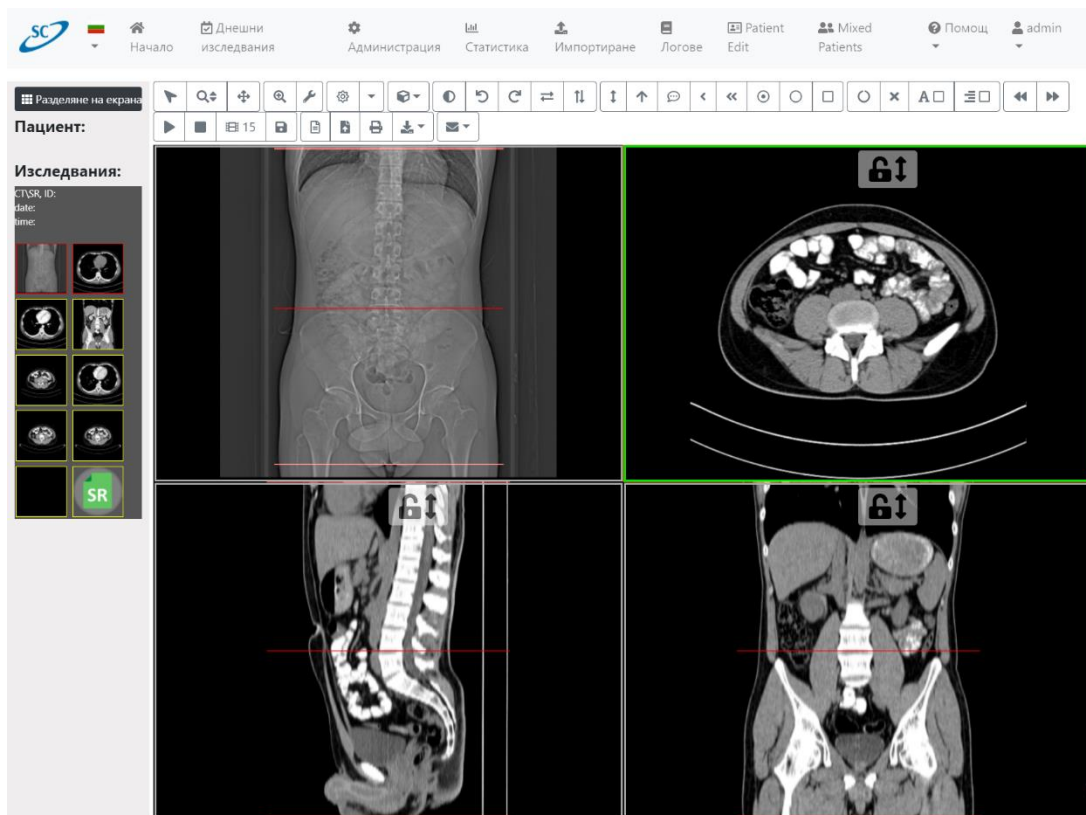

- Инвертиране – служи за инвертиране на цвета.



- Завъртане наляво – за завъртане на образа с 90° на ляво.



- Завъртане надясно – за завъртане на образа с 90° на дясно.



- Горизонтално обръщане – завърта образа огледално по хоризонтала.



- Вертикално обръщане – завъртане на образа огледално по вертикала



-Линия – за измерване на разстояние.



-Стрелка – този инструмент може да се използва за чертаене на стрелка върху изображението.



-Анотация – добавяне на коментар.



-Обикновен ъгъл – за чертаене и измерване на обикновен ъгъл.



-Ъгъл на Коб – за чертаене и измерване на ъгъл на Коб.



-Проба за плътност – взема плътност на база на един пиксел и дава информация за стойността на пиксела и плътността.



- Елипса – чертае елипса и дава информация за площ, средно и стандартно отклонение.



- Правоъгълник – чертае правоъгълник и дава информация за площ, средно и

стандартно отклонение.



- Връщане на изглед в първоначално състояние – връща образа към първоначалното му състояние: връща контраста, размера и позицията.



- Изчисти инструменти – изчиства всички използвани инструменти.



- Показване на информация – показва и скрива информацията за пациента - пациентско ID, ЕГН, дата на раждане, дата на изследване.



- Показване/скриване на скала.



- Изпълни – главно се използва за ангиографски изследвания. Може да пуска серията като клип. Може да се пускат и серии от други изследвания с повече образи.



- Спри – спира пуснатия клип.



- Регулиране на брой кадри в секунда.


Брой кадри в секунда

15

ОК

Затвори

Бутони „Превключване към следваща серия“ на лентата с инструменти:

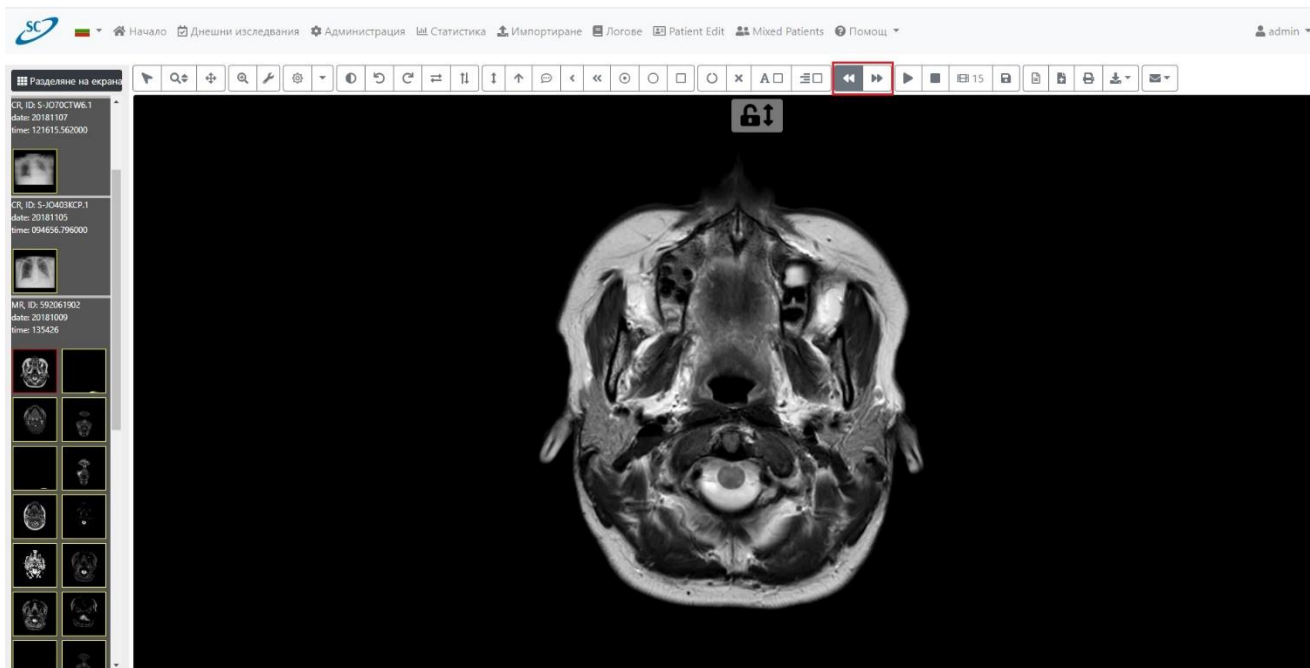


- Синхронно преглеждане на две серии едновременно. Трябва да заключите иконата с катинар от многосерийния изглед и за двете серии и със скрола на мишката да извършите прегледа на срезове.




- Добавяне на разчитане



- Разпечатване на текущия образ на офис принтер.

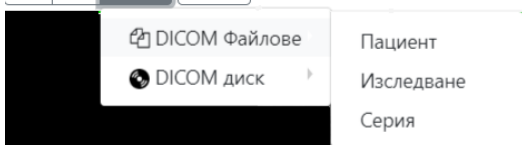


- Изтегляне на Пациент, Изследване, Серия в DICOM формат на локалния компютър, от който е отворен SC PACS Web Viewer.

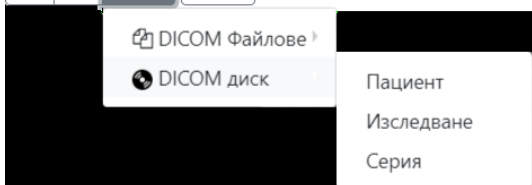


- Изтегляне на Пациент, Изследване, Серия в DICOM

формат на локалния компютър, от който е отворен SC PACS Web Viewer, с включен CD Viewer преглед на изтегленото изследване.

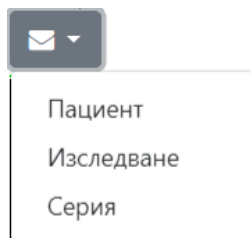


- Бутон за изпращане на пациент/изследване/серия чрез e-mail или до съществуващ потребител, за допълнителна консултация или задача.

Когато изберете една от опциите за изпращане, се отваря прозорец със следните опции:

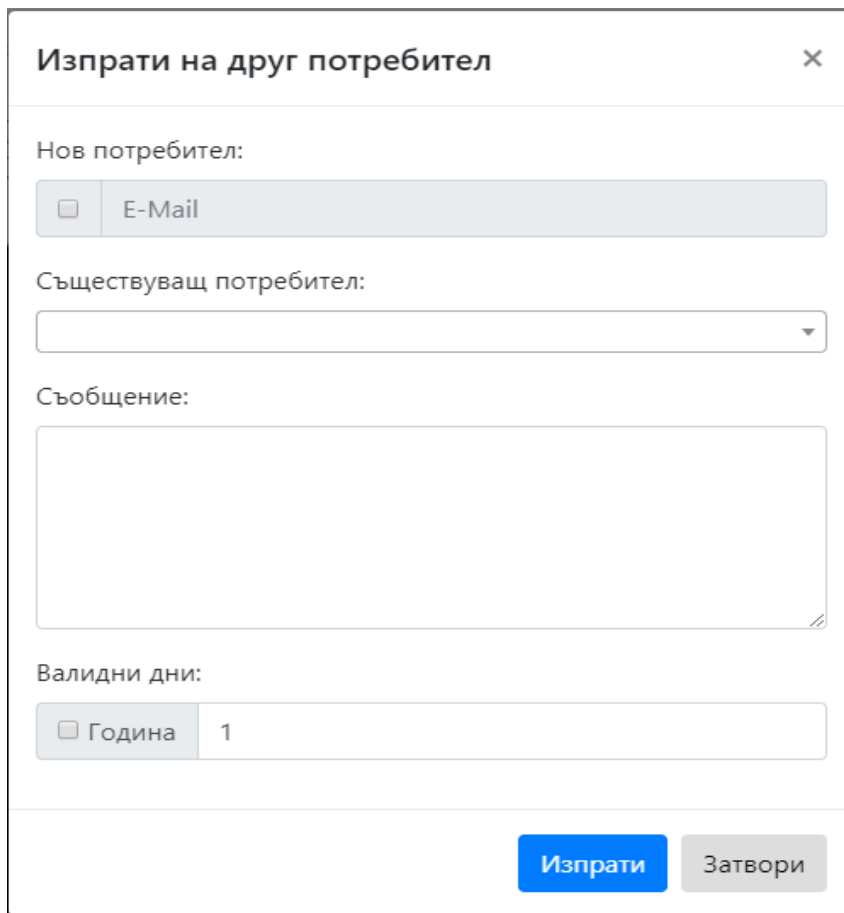A dialog box titled "Изпрати на друг потребител" (Send to another user) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and checkboxes. The first section is "Нов потребител:" (New user:) with a checkbox and the text "E-Mail". The second section is "Съществуващ потребител:" (Existing user:) with a dropdown menu. The third section is "Съобщение:" (Message:) with a large text area. The fourth section is "Валидни дни:" (Valid days:) with a checkbox and the text "Година" (Year) followed by a text field containing the number "1". At the bottom right, there are two buttons: "Изпрати" (Send) in blue and "Затвори" (Close) in gray.

- „Нов потребител“ – позволява да се изпрати линк към образите на пациента на зададен от Вас email.

- „Съществуващ потребител“ – позволява да се изпратят образите на пациента към съществуващ потребител в SC PACS системата, като възложена задача.
- „Съобщение“ – в свободен текст можете да опишете причината за изпращането.
- „Валидни дни“ – с тази опция се задава валидността на линка към изследването/възложената задача в дни.
- ✓ Запис на текущото изображение, като JPEG, без или с информация за пациента:

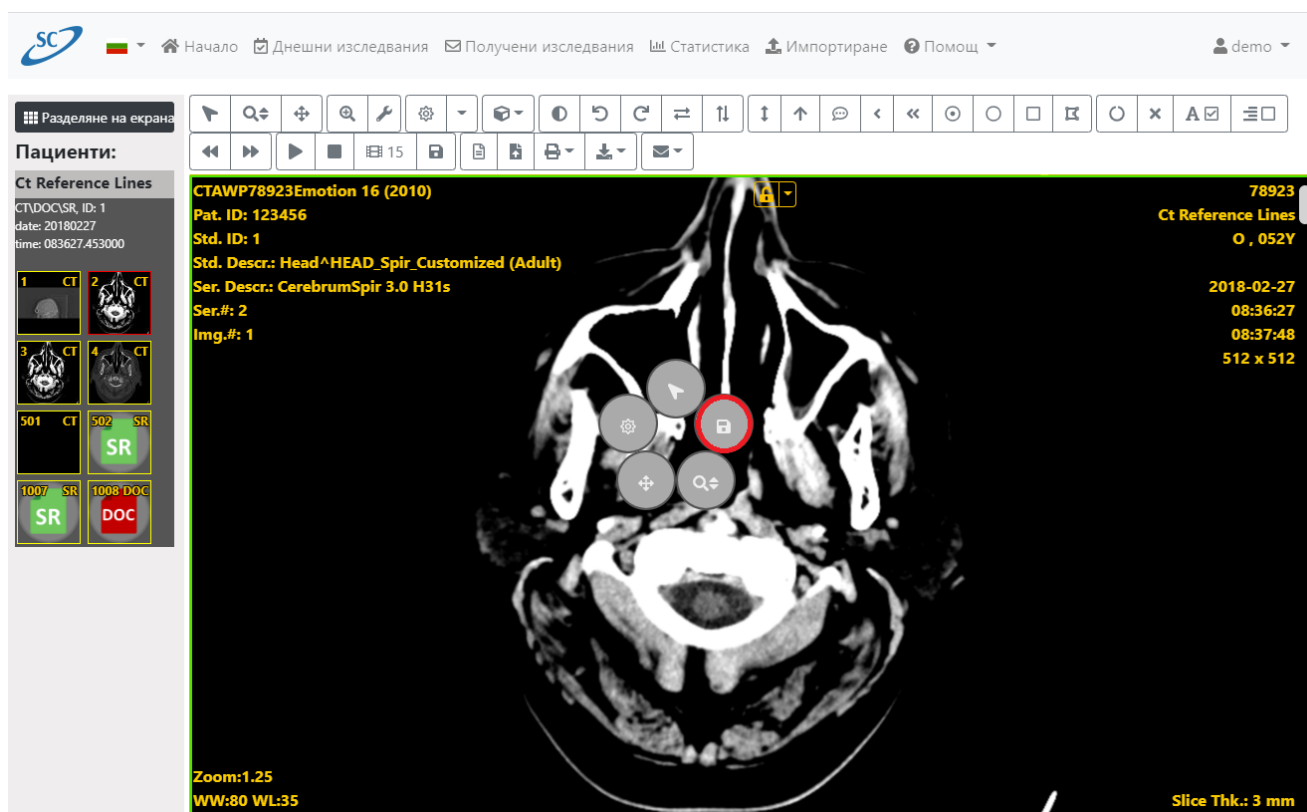

При натискане на десен клавиш на мишката върху изображението, се показват икони. При натискане на иконата с дискета изображението се запазва като jpeg. Ако информацията за пациента е показана, тя ще се запише в запазения jpeg файл.

Разчитане



- При натискане на бутона Разчитане в лентата с инструменти се появява нов прозорец, в който потребителят може да създаде и запише отчет за пациента на сървъра.

Информацията, която трябва да бъде включена в доклада, е разделена на няколко таблици, както следва:

Информацията за пациента включва име на пациента, идентификационен номер на пациента, дата на раждане, възраст, пол, тегло, ръст, телефонен номер, имейл и адрес.

Разчитане

 Пациент		 Клиника	 Разчитане	 Изображения	 Принтирай /  Запиши
ID на пациент		Име на пациент			
abdomen		абдомен			
Дата на раждане		Възраст	Пол		
1970/09/30			Мъж		
Тегло	Ръст	Телефонен номер			
70					
E-Mail		Адрес			
Съхрани Откажи					

- Клиника - има две полета - Име на институцията и Изпълняващ изследването

Разчитане

 Пациент		 Клиника	 Разчитане	 Изображения	 Принтирай /  Запиши
Име на институция			Изпълняващ изследването		
PMS			Administrator		
Съхрани Откажи					

- Разчитане - тази страница съдържа поле за описание, възможност докладът да се основава на избран шаблон и поле за писане на заключението:

Разчитане

Пациент
Клиника
Разчитане
Изображения
Принтирай / Запиши

Описание

Head^HEAD_Spir_Customized (Adult)

Шаблони за бланки

dok

Разчитане

- Избери шаблон -

български

Натиснете иконата на микрофона и започнете да говорите.

Заклучение

Съхрани
Откажи
Бар код 128
Бар код Qr

В долния десен ъгъл е показана икона на микрофон. При наличие на такъв, когато натиснете тази икона, ще се активира функционалността Google Speech-to-Text. В този момент ако говорите на български език, Вашите думи ще се разпознаят и ще запишат като текст.

- Изображения - тук потребителят може да реши дали да включи изображенията в отчета за пациента, да зададе броя на колоните, да зададе дали да се показват изображенията.





Разчитане

Пациент
Клиника
Разчитане
Изображения
Принтирай / Запиши

☐ Вмъкни изображения

1 Колони

☐ Показване на текстовия слой

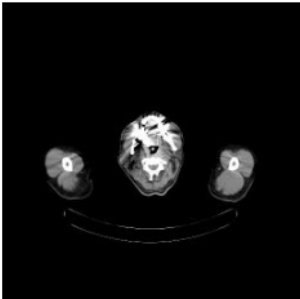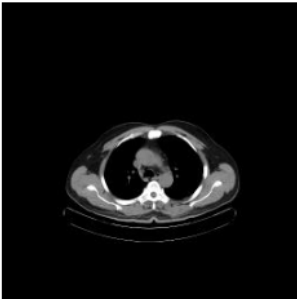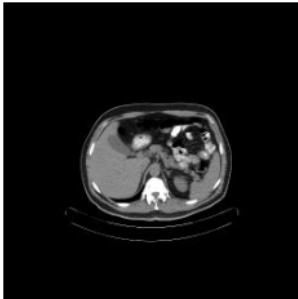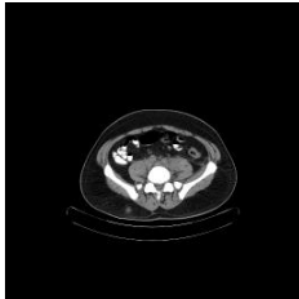Съхрани
Откажи

- Принтирай / Запиши - налични са два бутона - Прегледай / Принтирай и Изтегли

Разчитане

[Пациент](#) [Клиника](#) [Разчитане](#) [Изображения](#) [Принтирай / Запиши](#)

Прегледай/Принтирай

Изтегли ▾

Съхрани

Откажи

Кликването върху бутона Прегледай/ Принтирай показва отчета по начина, по който би изглеждал отпечатан. Той може да бъде изпратен към печат, използвайки контекстното меню над отчета.

В най-новата версия на продукта са разработени бутона за принтиране на Баркод 128 и QR код.

  [Начало](#) [Днешни изследвания](#) [Получени изследвания](#) [Статистика](#) [Импортиране](#) [Помощ ▾](#) demo ▾

Разчитане

[Пациент](#) [Клиника](#) [Разчитане](#) [Изображения](#) [Принтирай / Запиши](#)

Описание

Head^HEAD_Spir_Customized (Adult)

Шаблони за бланки

dok ▾

Разчитане

- Избери шаблон - ▾

български ▾

Натиснете иконата на микрофона и започнете да говорите.



Заклучение

Съхрани

Откажи

Бар код 128

Бар код Qr



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
• СВЕТА МАРИНА - ПЛЕВЕН •**

ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Българска Армия" №88
Тел.: 064 / 805 666, 064 / 81 81, 064 / 806;838 ; Web site: www.svmarina.com ; E-mail: info@svmarina.com

ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Име и Фамилия:	АНАТОЛИ ЕНЧЕВ ПЕТКОВ
Възраст:	052Г
Дата:	Monday, October 28, 2019
Изследване:	
Техника:	

Находка:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Провел изследването:
Administrator

Подпис:


SiteAndPin

Съхрани

Откажи

Кликването върху бутона за изтегляне показва следното падащо меню:

Разчитане

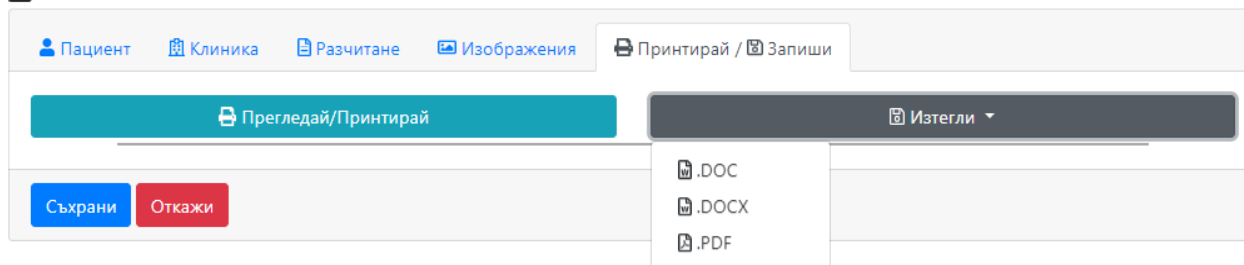


По този начин разчитането може да бъде запазено в MS Word или PDF формат.


Бутонът Съхрани съхранява разчитането на сървъра. Отказ скрива отчета, без да запазва промените и показва основния прозорец на SC PACS.

- ✓ Запазване на текущото изображение като jpeg без данни за пациента

Щракването с десния бутон върху изображението показва бутони за бърз достъп, сред които има бутон за запазване като jpeg:

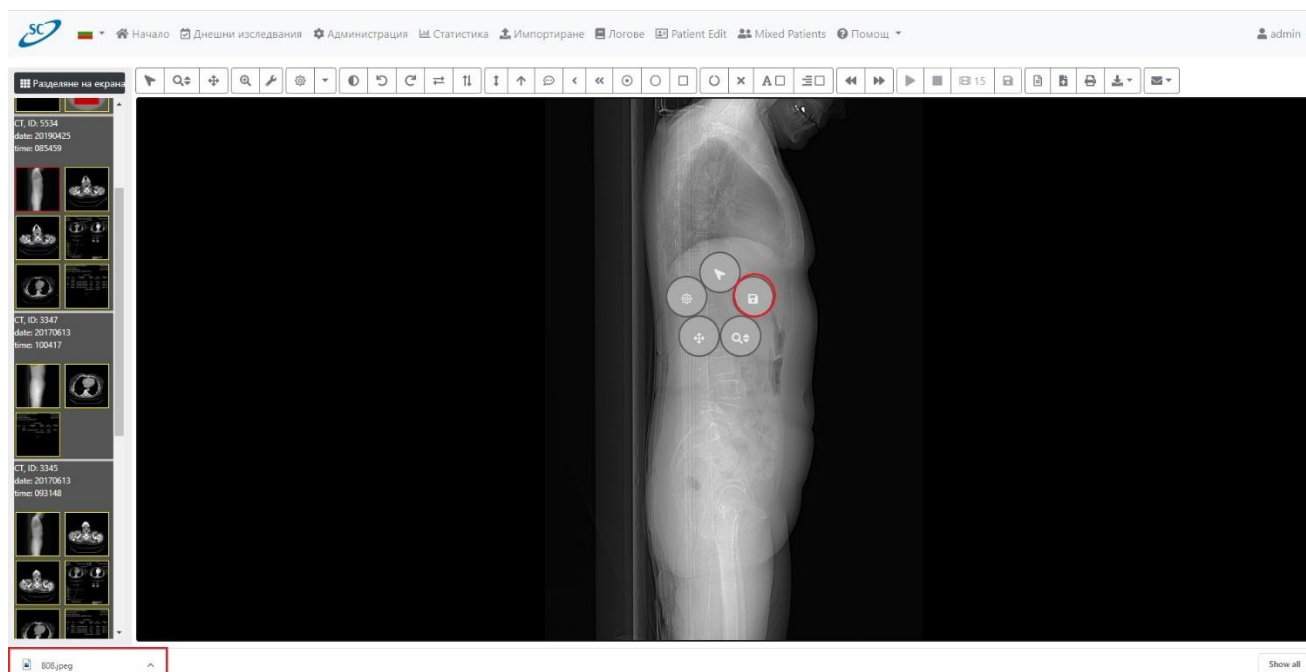


Съществува възможност за експортиране на многокадрови FX, XA изследвания във формат AVI. За да направите това, натиснете бутона, който е в червена рамка на екранната снимка по-долу.

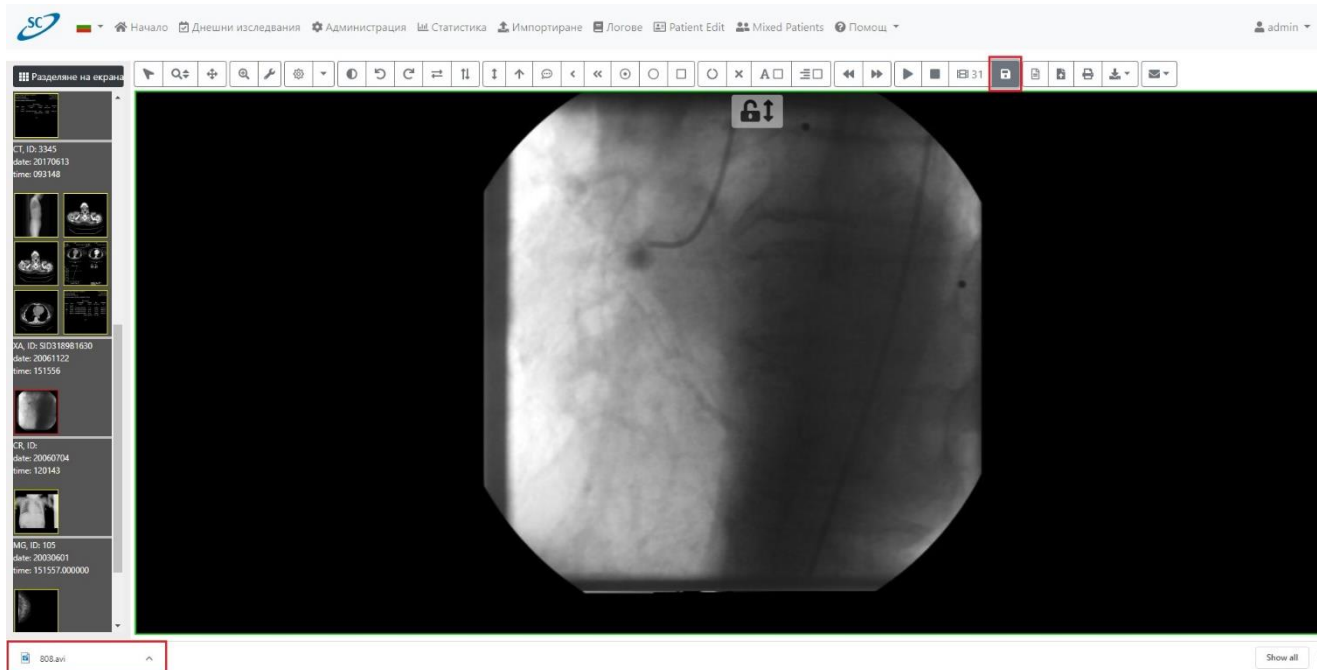


Забележки

- ✓ При използване на анотации/бележки – всяка от тях може да се премахне с натискане на десен бутон върху нея.
- ✓ Ако желаете да отворите друга серия, просто я изберете от полето в ляво.
- ✓ В горната част на екрана има бутони за улеснение на работата, както и бутона за излизане от системата:
 - Начало – връща потребителя в началното положение (списък с изследвания).
 - Днешни изследвания – показва всички изследвания от деня.
 - Получени изследвания – назначени изследвания (изпратени пациенти от други потребители в SC PACS системата).
 - Статистика – статистически справки за направените изследвания.
 - Импортиране – импортиране на DICOM изображения в PACS системата.
 - Излизане – излиза от системата с вписания потребител.


- Помощ – при натискане се появява следното меню:

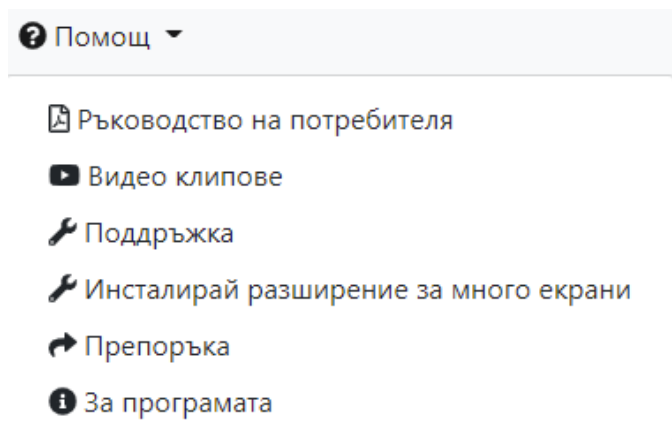

- Ръководство на потребителя – при избирането на тази опция се показва ръководството за потребителя на SC PACS
- Видео клипове – препраща към YouTube канала на SC
- Поддръжка – препраща към връзка посредством TeamViewer с поддръжката на продукта

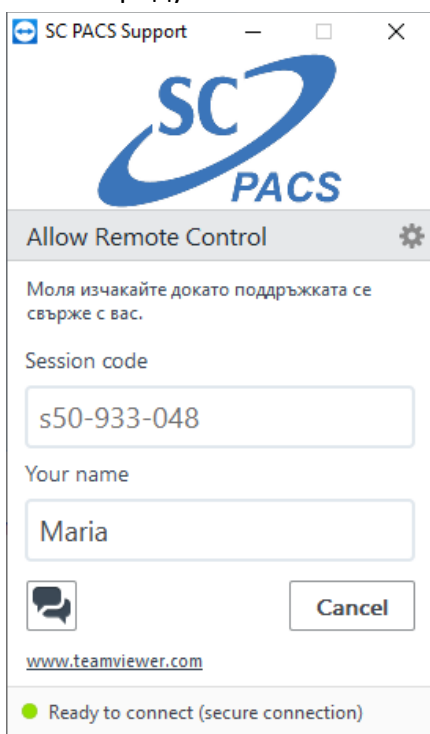

- Инсталирай разширение за много екрани – тази опция се появява, ако работите с повече от един монитор. При избирането и се инсталира плъгин, който позволява разпъване на изображението на два монитора. След инсталирането на плъгина, менюто вече изглежда така:

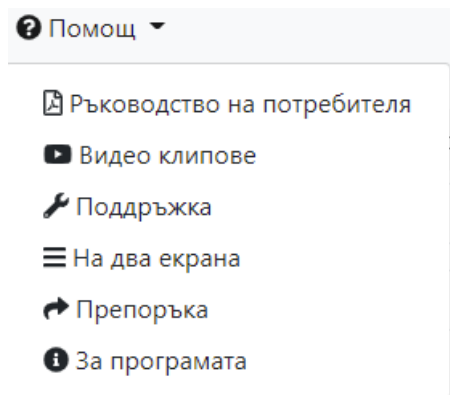

- Препоръка – при избирането на тази опция се отваря екран, където можете за запишете Вашата препоръка и да я изпратите на поддръжката на SC PACS:

SC

Начало Днешни изследвания Получени изследвания Статистика Импортване Помощ

demo

Препоръка

Болница:
Болница


Град:
Град

Относно:
Относно

Съобщение:
Описание (задължително)

Файлове:
Choose Files No file chosen

Запиши

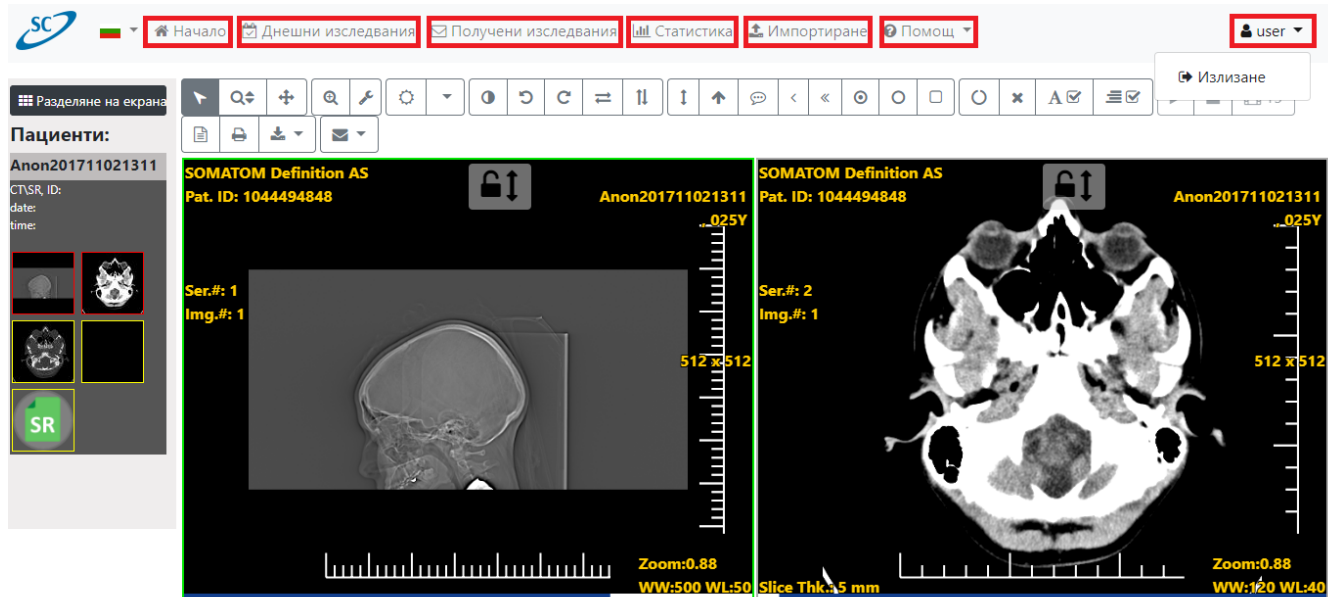

Потребителски акаунти и права

Има няколко типа потребители, които имат различни права:

- Администратор (Admin)
- Потребител (User)
- Секретар (Sec)
- Регистратор (Reg)
- Потребител със задачи

Admin - потребител от този тип има следните опции при влизане в системата:


🇩🇪
Начало
Днешни изследвания
Администрация
Статистика
Импортиране
Логове
Patient Edit
Mixed Patients
Помощ
Admin

Потребители
Групи
Работни постове
Шаблони за разчитане
Правила за рутинане
Настройки

Име на профила

Хост

Потребителско име

AE Title

E-Mail

Всички

Търси

Изчисти

Име на профила	Потребителско име	E-Mail	AE Title	Забранен	Роля	Създаден от	Действия
User	user		CISCO_AE	☐	User	-	 
Registrator	reg			☐	Registrator	-	 
radiant	radiant	radiant@r.r	RADIANT	☐	User	1. admin	 
plamen	plamen	pl@l.c	RADIANT2	☐	User	1. admin	 
sec	sec	sec@q		☐	Not Defined	1. admin	 
WebUser	vkk@nob.c	vkk@nob.c		☒	WebUser	-	 
RADIANT_C2	RADIANT_C2	RADIAN@T.C2	RADIANT_C2	☐	User	1. admin	 
vv	vv		RADIANT_VV	☐	User	1. admin	 
WebUser	murcielago12v60@gmail.com	murcielago12v60@gmail.com		☐	WebUser	-	 
WebUser	123@abc.com	123@abc.com		☒	WebUser	-	 

«

<

1

>

»

Създаване на потребител

С издаването на версия 2.2.0.0 е добавена нова функционалност за управление на проблем, който възниква при дублиране на идентификатор на пациент. Двете имена са записани в базата данни и интерфейсът за решаване на проблема, показан на екранната снимка по-долу, е достъпен за системния администратор.


🇩🇪
Начало
Днешни изследвания
Администрация
Статистика
Импортиране
Логове
Patient Edit
Mixed Patients
Помощ
admin

Mixed Patients Details

Showing mixed patient data for patient id: 705

PatientID	PatientName	PatientBirthDate	PatientSex	PatientComments
705	Unknown3	20030601	M	Current data
705	Unknown3	20030601	M	Discard Move Move to new patient

Освен това има функционалност за импортиране в случая, когато SC PACS Web импортира изследване на сървър и той изпраща данни на друг сървър, като изследването се изпраща на втория сървър.

User - потребител от този тип има следните опции при влизане в системата:

С излизането на версия 2.2.0.0, веб потребителите имат възможност да изберат импортирането на DICOM.

Sec - потребител от този тип има следните опции при влизане в системата:

Качено на	Лекар	ID на пациент	Име на пациент	ID на изследване	Описание
8/28/2018 3:05:04 PM	User	S0tNwu	INCISIX	A10020176376	Tete^Dental (Adulte)
8/28/2018 3:12:26 PM	User	S0tNwu	INCISIX	A10020176376	Tete^Dental (Adulte)
8/16/2019 6:23:11 PM	User	7301163201	DIMITAR^DIMITROV	25359	
8/23/2019 12:05:39 PM	User	7301163201	DIMITAR^DIMITROV	25359	
10/14/2019 4:12:12 PM	User	112	Melanix	TEST 123	

Reg - потребител от този тип има следните опции при влизане в системата:


🇧🇬
🏠 Начало
📄 Експортиране
📄 Импортиране
📄 Помощ
reg

Покази 25 резултата

ID на пациент	Име на пациент	Дата на раждане	Пол	Избери
Няма намерени резултати				

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

-- Всички Работни постове --

Няма намерени резултати

< >

днес

28 окт – 3 ное 2019

Седмица

Ден

	пон 28.10	вто 29.10	сря 30.10	чет 31.10	пет 1.11	съб 2.11	нед 3.11
06:00							
06:30							
07:00							
07:30							
08:00							
08:30							
09:00							
09:30							
10:00							
10:30							
11:00							

Има разработена функционалност за запазване на часове с одобрението на лекаря, получил заявките, която работи по следния начин:

Избира се ден и час в календара в долната част на екрана чрез маркиране с мишката.

SC Начало Экспортиране Заявки Имортиране Помощ reg

Телефонен номер
 Име на пациент
 Дата (От)
 Дата (До)

Покази 10 резултата

Първа

1

 Предишна
 Следваща
 Последна

Име на пациент	Телефонен номер	Дата	Време	E-Mail	Избери
Nina	089554448911	2021/04/28	16:00	nina@abv.bg	
Nina Ivanova	089553345623	2021/06/17	17:00	ni@nov.com	
Ramena	0895543446	2021/04/28	16:30	ra@nov.com	

Резултати от 1 до 3 (от общо 3)

ID на пациент
 Име на пациент
 Дата на раждане

Покази 8 резултата

Първа
 Предишна
 Следваща
 Последна

Телефонен номер: Име на пациент: Дата на раждане: Пол: Избери:

Няма намерени резултати

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

ID на пациент
 Име на пациент
 Дата на раждане
 Мъж
 Коментар

ID на пациент
 Име на пациент
 Възраст

-- Всички Работни постове --
 Изпращащ лекар
 Изпълняващ изследването

Няма намерени резултати

21 – 27 юни 2021

	пон 21.6	вто 22.6	сря 23.6	чет 24.6	пет 25.6	съб 26.6	нед 27.6
08:30							
09:00							
09:30			9:30 – 10:00				
10:00							

От таблицата със заявки избираме тази, която ще уточняваме и натискаме бутона с икона на ръка в най-дясната колона на избраната заявка:

SC Начало Экспортиране Заявки Имортиране Помощ reg

Телефонен номер
 Име на пациент
 Дата (От)
 Дата (До)

Покази 10 резултата

Първа

1

 Предишна
 Следваща
 Последна

Име на пациент	Телефонен номер	Дата	Време	E-Mail	Избери
Nina	089554448911	2021/04/28	16:00	nina@abv.bg	
Nina Ivanova	089553345623	2021/06/23	09:30	ni@nov.com	
Ramena	0895543446	2021/04/28	16:30	ra@nov.com	

Резултати от 1 до 3 (от общо 3)

ID на пациент
 Име на пациент
 Дата на раждане

Покази 8 резултата

Първа
 Предишна
 Следваща
 Последна

Телефонен номер: Име на пациент: Дата на раждане: Пол: Избери:

Няма намерени резултати

Резултати от 0 до 0 (от общо 0)

ID на пациент
 Име на пациент
 Дата на раждане
 Мъж
 Коментар

ID на пациент
 Име на пациент
 Възраст

-- Всички Работни постове --
 Изпращащ лекар
 Изпълняващ изследването

Няма намерени резултати

21 – 27 юни 2021

	пон 21.6	вто 22.6	сря 23.6	чет 24.6	пет 25.6	съб 26.6	нед 27.6
08:30							
09:00							
09:30			9:30 – 10:00				
10:00							

добавяне на процедура

След натискането на този бутон се показва следният диалог, където се попълва необходимата информация. Полетата, маркирани със звездичка, са задължителни.

Добавяне на процедура

Пациент

ID на пациент * Имя на пациент * Дата на раждане Пол

2021/06/17 17:00 2021/06/17 17:00

Процедура

Дата (От) * Време (От) * Дата (До) * Време (До) *

2021/06/17 17:00 2021/06/17 17:00

Приоритет Изпращащ лекар Насочено към лекар Работен пост

STAT - - TEST (testg)

Плъщане Контраст

- мЛ

Описание

Запиши

21 – 27 юни 2021

	пон 21.6	вто 22.6	сря 23.6	чет 24.6	пет 25.6	съб 26.6	нед 27.6
08:30							
09:00							
09:30							
10:00							

Потребител със задачи:

Получени изследвания

NIKOLAY, GEORGIEV, RUSATEV	Пациент
AHMED^SEBIL^SALI	Пациент
afdsdfa	Пациент

ИЗВЕСТНИ ПРОБЛЕМИ:

Бутонът за печат на принтера на Windows не работи. **РЕШЕНИЕ:** изтеглете pdf файла и отпечатайте като такъв, а не чрез приложението SC PACS.